



### Asa de Digralsky para extensiones. Estéril

Asa para siembra por diseminación en superficie.  
Fabricada en poliestireno blanco.

#### Estéril por radiación.

Longitud total: 149 mm.


Longitud de la base: 40 mm.

La longitud de la base la hace apta para sembrar muestras líquidas en todo tipo de placas de Petri sin tocar las paredes de la placa.

La punta inclinada y los cantos redondeados minimizan la posibilidad de rotura del medio sólido durante la extensión.

Disponible en embalaje peel-pack de 1 o 5 unidades, marcado con código, caducidad y lote.

código	presentación	cantidad caja	peso caja	volumen caja
200500	peel-pack de 5 unidades	200 x 5	3,00	0,025
200510	peel-pack de una unidad	500	2,44	0,026

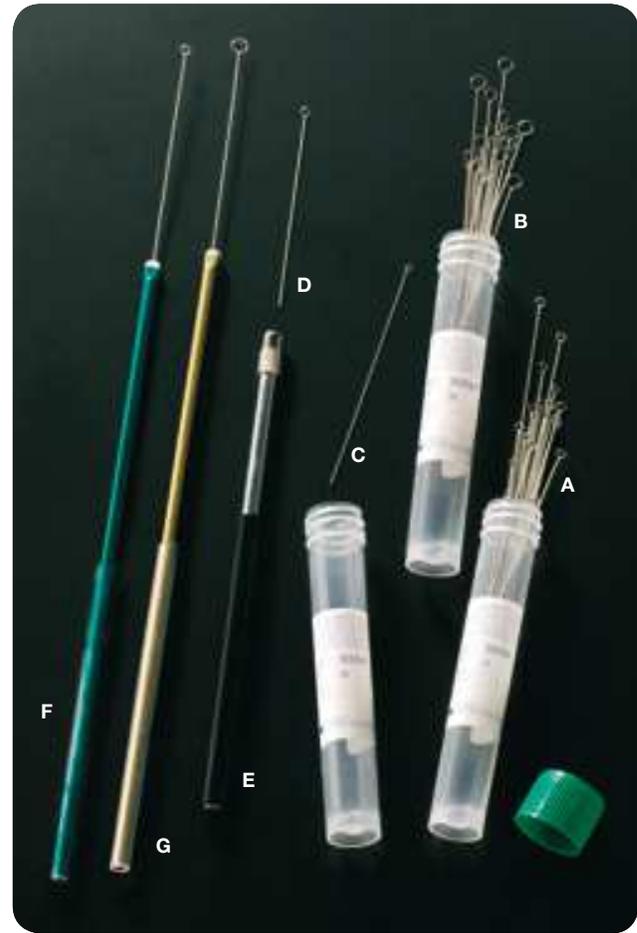

### Asas en nicrom

Asas en nicrom para microbiología. Frente a las tradicionales asas de platino y rodio, la aleación de níquel y cromo resulta más duradera, y menos costosa. Además, ofrece una superficie pulida libre de asperezas, y permite un rápido enfriamiento tras la esterilización por calor.

#### Asas no calibradas (mod. A y B):

Asas no calibradas, sin mango para ahorrar tanto en términos económicos como en espacio de almacenamiento. Presentadas en tubos de 25 unidades, especificando código, descripción, y lote.

#### Asas calibradas (mod. C y D):

Asas calibradas en nicrom. Se suministran de forma individual en un tubo con tapón a rosca y faldón, etiquetado con el código, descripción y lote.

Tanto las asas calibradas como las no calibradas son fácilmente acoplables al mango de PVC y aluminio (mod. E) con un simple movimiento de rosca. El mango mide 150 mm.

#### Asas no calibradas con mango incorporado (mod. F y G):

Asa no calibrada en aleación nicrom. Mango de aluminio ligero (mod. G en color dorado, mod. F en verde) parcialmente protegido por un plástico transparente, aislante, antideslizante y muy cómodo. Miden 275 mm.

mod.	código	descripción	longitud total mm	cantidad
A	302762	Asa no calibrada 2 mm Ø	75	25
B	302764	Asa no calibrada 4 mm Ø	75	25
C	302771	Asa calibrada 1 µl	150	1
D	302772	Asa calibrada 10 µl	150	1
E	302780	Mango en PVC y aluminio para asas	150	1
F	302792	Asa no calibrada de 2 mm Ø con mango	275	5
G	302794	Asa no calibrada de 4 mm Ø con mango	275	5