


Hisopos flocados para la recolección de muestras

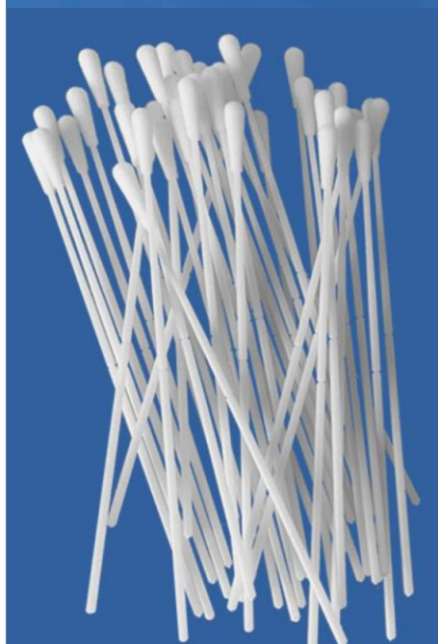

Paquete fácil de rasgar

Paquete listo para usar
y fácil de rasgar,
evita eficazmente
la contaminación cruzada.

Paquete de hisopos



Paquete de hisopos



Detalles del Hisopo Flocado



Punto
de Quiebre

Palo de plástico a presión

Recogedor desechable,
compuesto por una barra de plástico
y un aplicador de viscosa.



Innovadora tecnología de nylon incrustado

Puede mejorar la eficiencia de la
recolección de muestras.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Hisopos flocados para la recolección de muestras

Los hisopos flocados son ideales para recolectar gran cantidad de las muestras.

Los hisopos flocados utilizan tecnología innovadora de fibra de nylon para proporcionar una excelente recolección y liberación de muestras. Hisopo de fibra de nylon que permite una mejor recolección. Tiene un eje de plástico con "punto de ruptura" para permitir que el hisopo se rompa en el tubo de ensayo.

ESPECIFICACIONES DEL HISOPO

Material del hisopo	Nylon flocado
Uso de los hisopos	Industrial
Material del Mango	Plástico PP
Logintud	150 mm
Punto de quiebre	30 mm
Empaque	Blister individual con bolsa rasgable
Esterilización	Por Oxido de Etileno (EO)]
Vida Util	3 años.
Presentacion Venta	Caja x 100 und.



Ventaja de hisopo flocado

- Recolectar gran cantidad de muestra.
- Rápida elución del 95% y liberación de la muestra
- Diseño de punto de ruptura moldeado en hisopo
- La tecnología innovadora de nylon incrustado puede mejorar la eficiencia de la recolección de muestras. El nylon se adhiere vertical y uniformemente en la superficie de la punta del hisopo, lo que puede mejorar la eficiencia de recolectar muestras.
- Mejora la sensibilidad analítica, sin muestra residual y puede acelerar el tratamiento de la muestra.

